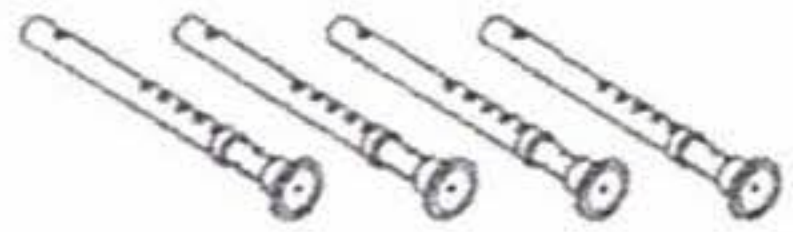

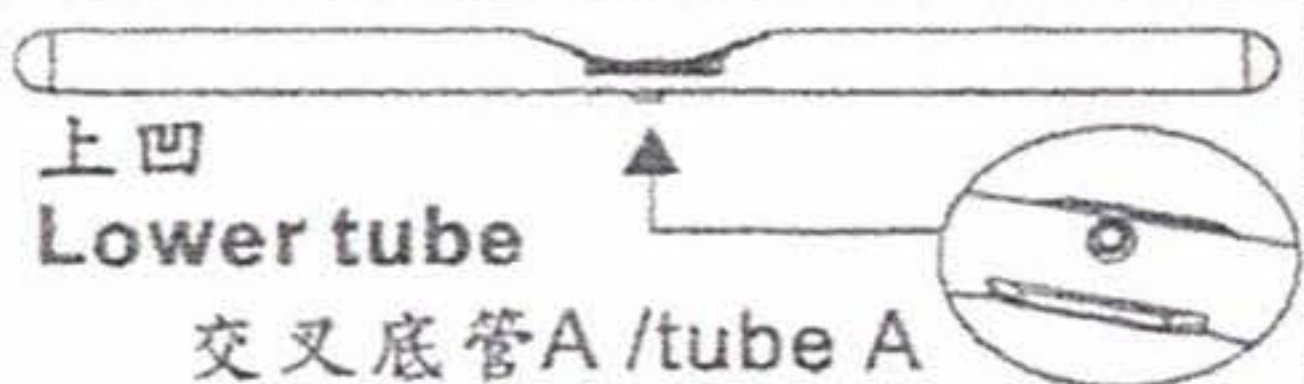
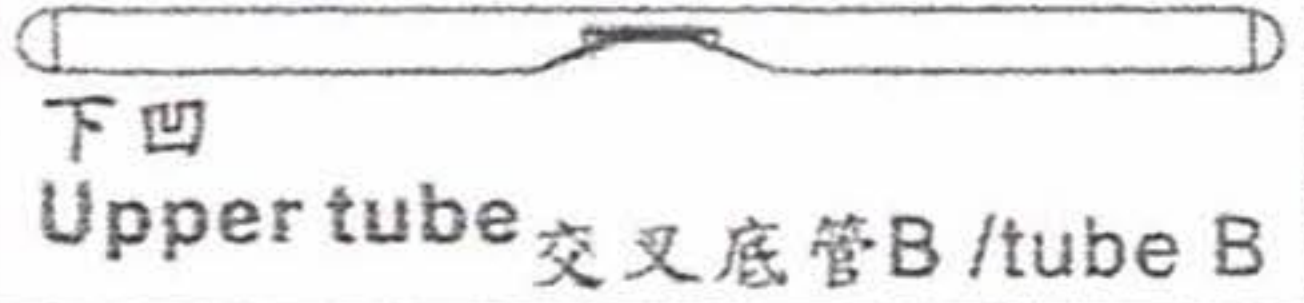





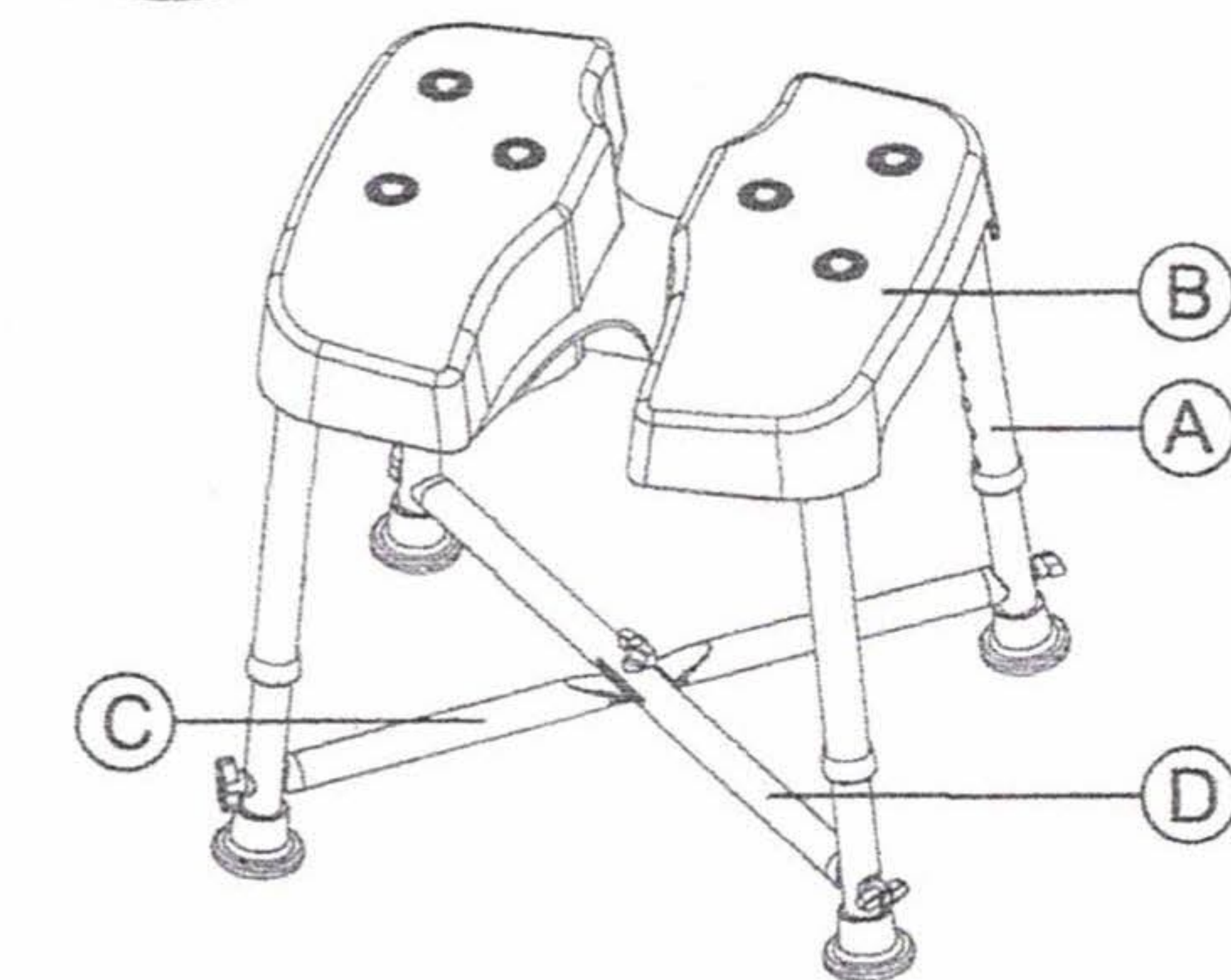
A-0271A 無靠背洗臀椅

Dura Hygienic Cutout Shower Seat

FDA CE




名稱, 圖示/Parts	編號 NO.	數量 Qty
 腳管/Leg tubes	(A)	4
 坐墊/seat	(B)	1
 上四 Lower tube 交叉底管A /tube A	(C)	1
 下四 Upper tube 交叉底管B /tube B	(D)	1
 一字型螺絲/Screw-M6x28L	(E)	1
 一字型螺絲/Screw-M6x38L	(F)	4
 R華司/R Type Washer	(G)	5




台灣製
Made In Taiwan

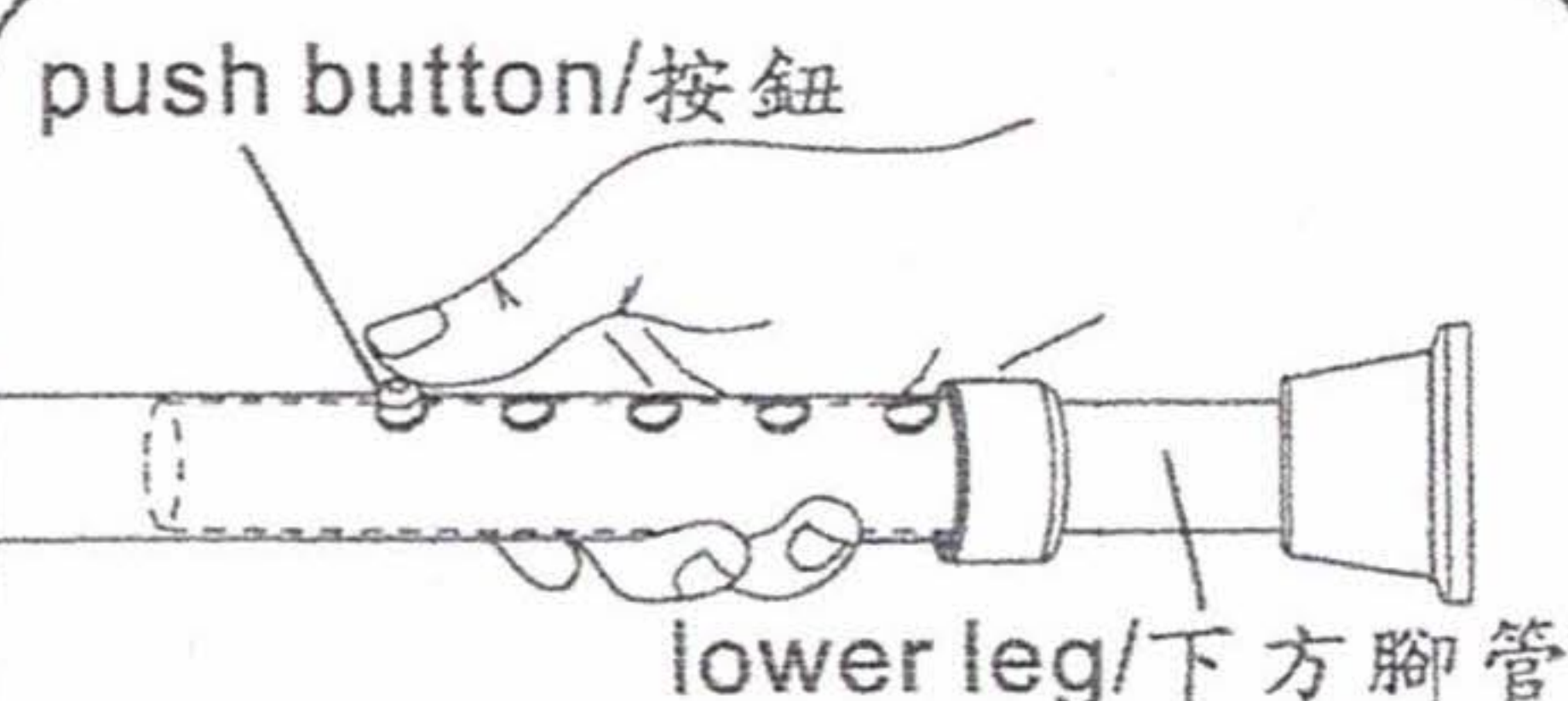HEIGHT ADJUSTMENT 高度調整說明




Depress the push button and pull the lower leg to the desired length; ensure that the push button snaps through the latch hole. Repeat with remaining legs, so that all legs are adjusted to the same length.

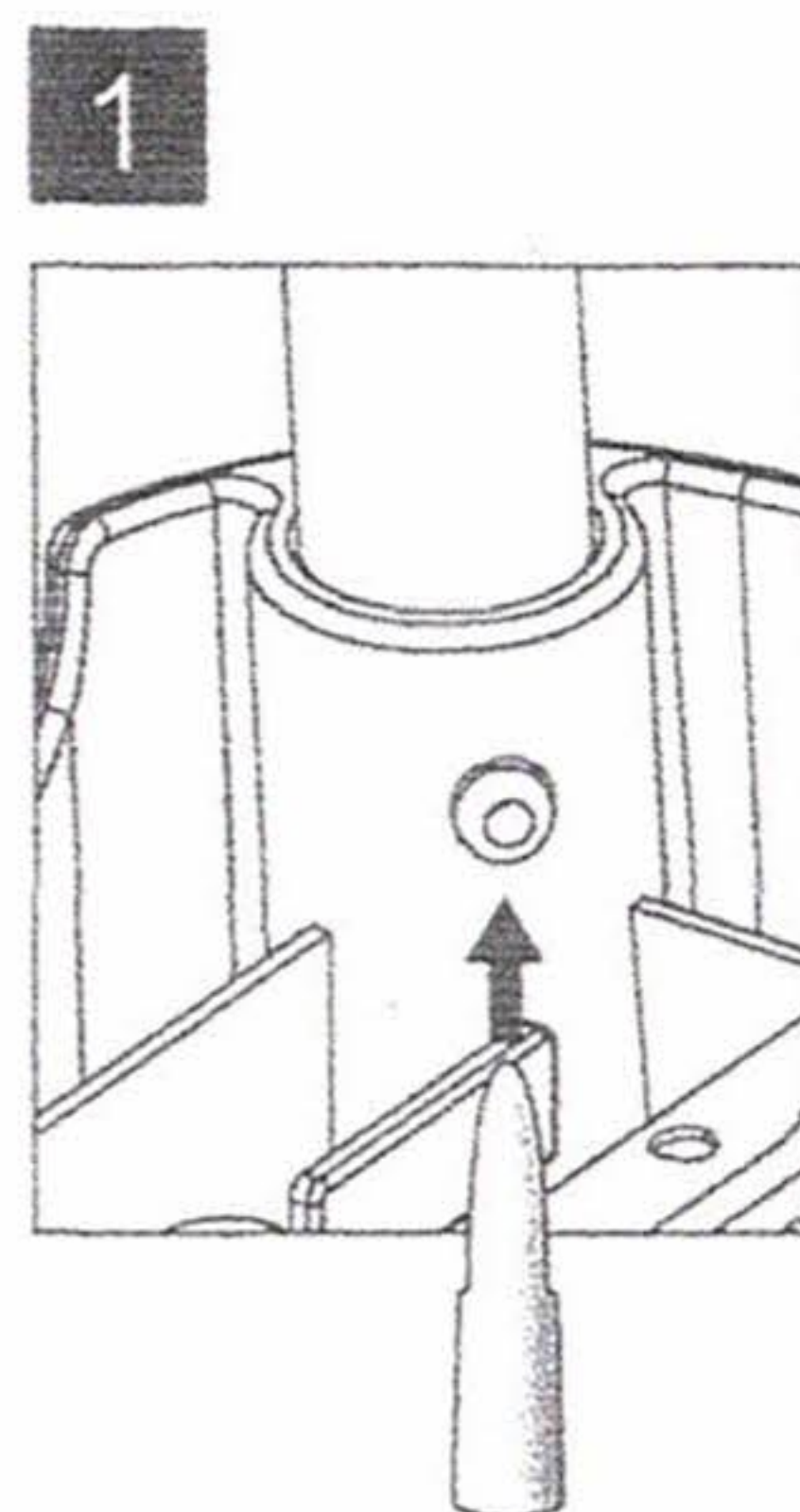壓下下方腳管按鈕並調整至需要的高度, 同時確認按鈕滑入並固定在調整孔內。同樣動作用於其餘腳管, 調整至同樣高度。



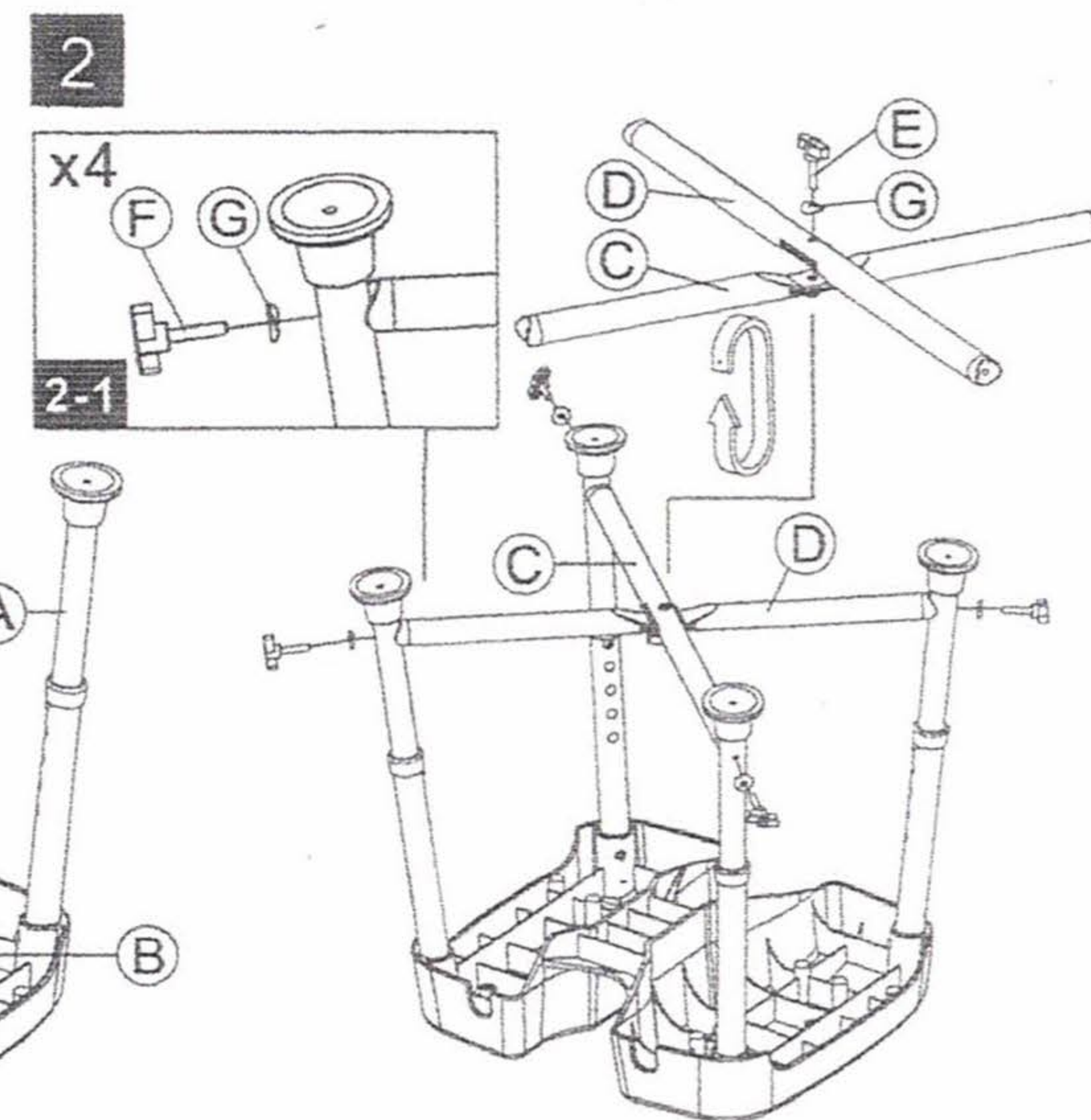Remove leg tubes from the hub with small stuff.
移除腳管使用細小物件插入拔除。



Instructions:

1. Depress the push button and pull the lower leg to the highest height. Insert each leg tube (A) into the seat (B). (Caution: For secure installation, make sure the button on each leg is fully engaged to the hub on the seat).
2. Put tube (D) on (C) in the cross position and then screw tube (D) on (C) with parts (E) & (G) in the center. After assembled, turn the cross tube set to opposite side. Put (C) as the direction remarked (2) in seat, and put (D) as the direction remarked (1) in seat. As shown in partial magnified figure, screw parts (F) & (G) with leg tube tightly.

CAUTION:

1. Read instruction before assembly.
2. Please check before assembling if the parts quantities are correct.
3. Should be checked before each use to make sure it is securely assembled. Reinstall if necessary.
4. Max User Weight (500lbs. / 227kgs)
5. Do not sit alone on the corner of the seat to avoid injured.
6. Loosely install each screw one by one firstly. Once all screws are inserted, tighten all screws fully.
7. To adjust the height, loosen 5 screws inserted in the cross tube set first, and then depress the push buttons and pull the lower legs to the desired height.
8. MedGear assumes no liability for any damage or injury caused by improper assembly or use of this product.

組裝說明:

1. 按壓腳管按鈕調整至最高高度。腳管 (A) 插入坐墊 (B)。(注意: 按鈕需彈出且固定在坐墊孔內)
2. 將 (C) . (D) 以十字交疊, 並使用 (E) & (G) 鎖於中間交叉處後翻轉交叉底管組至圖片方向, (C) 對應坐墊上標示 (2) 號之方向, (D) 對應坐墊 (1) 號。如圖2-1貼齊管口將半圓弧面貼合腳管, 以 (F) & (G) 對準腳管 (A), 分別均勻地將 (A) 與 (C) & (D) 四邊腳管鎖緊固定。

警告:

1. 組裝前請詳細閱讀說明書。
2. 組裝前請先確認零件數量, 是否正確。
3. 請於每回使用前請確認產品是否牢固組裝, 否則須再重新組裝牢固再使用。
4. 產品最大承重量500磅/227公斤。
5. 請勿單獨坐在坐墊的一角, 以免傾倒受傷。
6. 所有螺絲要先架上而不鎖緊, 待全部螺絲正確組裝完, 才逐一鎖緊。
7. 如需調整腳管高度, 請先鬆開鎖於交叉底管的5支螺絲, 再按壓按鈕調整至所需腳管高度。
8. 美而系列商品如因不適當組裝或不適當使用而損壞, 恕不接受退換貨或賠償。